

# 極限まで追求した シンプルな 使いやすさ



## 大画面で見やすい表示

- 文字サイズを25%アップ<sup>※1</sup>し、測定値が読み取りやすい設計。
- バックライト搭載で画面の視認性向上。

## アイコンで測定をサポート

- (笑顔のアイコン)で安定判断し、(校正アイコン)で校正時の電極感度を表示。

## コンパクトなボディ&電極スタンド

- 設置面積を削減し、省スペースでの作業を実現。
- メータの左右どちら側でも取付可能な一体型の電極スタンドを採用。

※1 当社従来モデルF-71との比較

# ¥98,000~

分解能：0.01

プリンタと接続可能


1000メモリ

AC電源駆動

## 選べる2種類のパッケージ

### プラスチック電極で測る

プラスチックボディ電極 9625-10D 付属

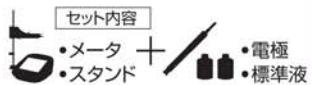

PH-SE パッケージ

¥98,000 (税抜)

品目コード : 3200920677

セット内容  
・メータ  
・スタンド  
・電極  
・標準液

電極先端が保護管でガードされている、プラスチックボディ電極とのセット。実習などに最適です。

### ガラス電極で測る

スタンダード ToupH 電極 9615S-10D 付属



PH-SE-GL パッケージ

¥110,000 (税抜)

品目コード : 3200920678

セット内容  
・メータ  
・スタンド  
・電極  
・標準液

JIS 規格の強度10倍の応答ガラスを採用した、ガラス電極とのセット。ドーム型で洗浄もカンタン、幅広い試料に対応します。

\*セットにORP電極は含まれません。別途、ご購入ください。

## ■ 仕様

形式	LAQUA-PH-SE
計量法形式承認番号	第SS212号
測定項目	pH/ORP/温度
JIS 形式	JIS形式 I
測定方式	ガラス電極法
測定範囲(表示範囲)	pH0.00 ~ 14.00(pH-2.00 ~ 20.00)
分解能	0.01 pH
計器再現性(精度)	± 0.01 pH ±1digit
校正点数	最大5 点(USA、NIST、NIST2) / 最大6 点(DIN、Custom)
測定・表示範囲	± 2000.0 mV
分解能	0.1 mV
計器再現性(精度)	± 0.1 mV ±1 digit
測定範囲(表示範囲)	0.0 °C ~ 100.0 °C (-30.0 °C ~ 130.0 °C)
データメモリ	1000 件
PC 接続	あり(USB 通信ケーブル必要)
プリンタ出力	あり(GLP、GMP 対応)
電源	AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60 Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)
外形寸法	160 (L) × 150 (W) × 66 (H) mm (一体型スタンド除く)
質量	約770 g
一体型電極スタンドオプション	左右 脱着式

## ■ 標準液・アクセサリ

### pH標準液セット(精度±0.02pH)

形式	名称	pH値(25°C)	容量(mL)	備考
101-S ¥5,000 3200043642	フタル酸塩標準液	4.01	250	原液のまま使用。 左記標準液と内部液が 同梱されたセットです。
	中性リン酸塩標準液	6.86	500	
	ホウ酸塩標準液	9.18	250	
	比較電極内部液(#300)	—	250	

### ORP標準液用粉末(精度±15mV)

形式	名称	ORP値(25°C)	備考
160-51 ¥4,000 3200043618	ORP標準液用粉末	89mV (塩化銀比較)	ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。
160-22 ¥4,000 3200043617	ORP標準液用粉末	258mV (塩化銀比較)	この標準液は調製後ただちに使用し、 2時間以上は使用できません。(10袋入)


## プリンタ関連



※その他の標準液・アクセサリの詳細は、電極/アクセサリ総合カタログをご覧ください。

※記載されている価格はすべて希望販売価格(税抜)です。

## ORP電極

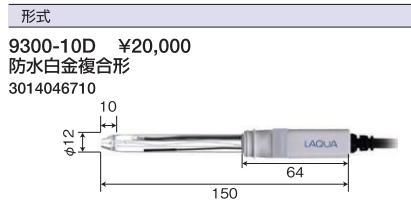

## WEB 水質計専門YouTubeチャンネル



水質計をより知つていただくための YouTube チャンネルを開設いたしました。

- 適切なメンテナンス方法のご紹介
- 測定原理について詳しくご説明
- 装置の特長や動作の確認

[www.youtube.com/HoribaWater](http://www.youtube.com/HoribaWater)



## 株式会社堀場アドバンストテクノ

〒601-8551 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-321-7184

<http://www.horiba-adt.jp>

東 北 022-776-8253 東 京 03-6206-4751 名古屋 052-937-0812  
大 阪 06-6390-8211 九 州 092-292-3595

<memo>

- 製品の技術的なご相談をお受けします。 カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル **0120-37-6045**

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00

【祝祭日を除く月曜日~金曜日】

※携帯電話・PHSからでもご利用可能です。

※一部のIP電話からご利用できない場合がございます。